

^{9.050}
Budget



ERSATZTEILLISTE

Budget 2

Modell 9.050

D

MEYRA[®]
ORTOPEDIA
Wir bewegen Menschen

Budget 2 / a Inhaltsverzeichnis
--

Einleitung	4
Bestellbeispiel	5
01 Rahmen	
-Rahmen	6
05 Bremse	
-Druckbremse	7
-Trommelbremse	7
06 Fahrwerk	
-Lenkrad	8
-Antriebsrad	8
07 Rücken	
-Rückengurte	9
08 Sitz	
-Sitzgurte	10
09 Seitenteil	
-Code 70; Seitenteil lang, abschwenkbar, abnehmbar	11
-Code 107; Seitenteil abschwenkbar, höhenverstellbar, abnehmbar	11
-Code 577; Abklappbares Seitenteil mit Kunststoffeinsatz Stahl	12
10 Beinstützen	
-Code 92; abnehmbare höhenverstellbare Beinstütze, abschwenkbar	13
-Code 93; abnehmbare Beinstützen abschwenkbar	14
-Code 805; Fußplatten Kunststoff geteilt	14
12 Scheren	
-Scheren	15
20 Sitzkissen	
-Sitzkissen	16
Zubehör	
-Zubehör	17

Für Ihre Bestellung von Ersatzteilen sind genaue Angaben erforderlich. Nur so ist gewährleistet, dass Ihnen das richtige Ersatzteil zugestellt wird. Alle MEYRA-ORTOPEDIA -Rollstühle werden nach dem MEYRA-ORTOPEDIA -Baukastensystem gefertigt. Ihr Fahrzeug gliedert sich demnach in Baugruppen auf. Zur leichteren Auffindung des gesuchten Ersatzteiles ordnen Sie dieses in die entsprechende Baugruppe ein.

Baugruppenübersicht

Baugruppe 01: Rahmen

Baugruppe 03: Lenkung

Baugruppe 04: Antrieb

Baugruppe 05: Druckbremse

Baugruppe 06: Fahrwerk

Baugruppe 07: Rücken

Baugruppe 08: Sitz

Baugruppe 09: Seitenteil

Baugruppe 10: Beinstütze

Baugruppe 12: Schere

Baugruppe 15: Elektrische Anlage

Baugruppe 16: Arbeitstisch

Baugruppe 17: Stützrollen

Baugruppe 20: Sitzkissen

Baugruppe 24: Sonstige Codierungen

Baugruppe 26: Verkleidung

Baugruppe 98: Zubehör und Kleinteile

Baugruppe 99: Schaltpläne

Im Inhaltsverzeichnis sind die verschiedenen Ausführungen einer Baugruppe aufgeführt; somit finden Sie schnell und sicher das gesuchte Ersatzteil.

Hinweis:

In der Baugruppenübersicht sind auch Baugruppen enthalten, die nicht für Ihr Modell zutreffend sind.

Haftung / Garantie bei Fremdprodukten

Verwenden Sie keine Fremdprodukte als Ersatz- oder Zubehörteile für MEYRA-ORTOPEDIA -Rollstühle. Diese können die Betriebssicherheit des Rollstuhles beeinträchtigen, auch dann, wenn die Fremdprodukte durch eine TÜV-Abnahme oder eine behördliche Genehmigung (Allgemeine Betriebserlaubnis) geprüft sind, da der Prüfumfang nicht immer ausreicht.

MEYRA-ORTOPEDIA übernimmt keine Haftung oder Garantie für Fremdprodukte als Ersatz oder Zubehörteile sowie für Schäden und Unfälle, die durch deren Auswechslung oder Einbau eintreten.

Sicherheitshinweise bei Verwendung von Ersatzteilen

- Beim Austausch von Teilen nur das dem Rollstuhl-Modell und Code-Nr. entsprechende Bauteil verwenden.
- Überprüfen Sie nach Erhalt des bestellten Ersatzteiles die Richtigkeit der Lieferung!
- Nur autorisierte Fachhändler oder Fachwerkstätten dürfen Reparaturen am Rollstuhl durchführen
- Führen Sie nach Reparatur des Rollstuhles eine Probefahrt durch. Achten Sie auf ungewöhnliche Fahrgeräusche und überprüfen Sie:
 - die Bremsfähigkeit
 - die Lenkfähigkeit
 - den Geradeauslauf

Verwendete Abkürzungen

In den Stücklisten finden Sie folgende Abkürzungen:

AT bedeutet Austauschteile

Mit Buchstaben angezogene Teile (Artikel oder Normteile) sind nach Sichtprüfung wiederverwendbar!

Besonderheiten

Positions-Nr. mit Buchstaben versehen, beziehen sich auf nicht dargestellte Teile (z.B. für die gegenüberliegende Seite).

Budget 2 / a Bestellbeispiel

Bestellbeispiel

Gehen Sie für ihre benötigten Bestellbeispiele wie folgt vor:

- 1. Typ/Modell**
Entnehmen Sie die Typ-Nr. der Betriebsanleitung, dem Lieferschein oder dem Typenschild unter Typ bzw. neben Modell.
- 2. Baujahr und Fahrzeug-Nr.**
Lesen Sie das Baujahr sowie die Fahrzeug-Nr. vom Typenschild ab, z.B.:
Baujahr: 2008-52
Fz-I-Nr.: 5678901
- 3. Baugruppe**
Ordnen Sie das defekte Teil einer Baugruppe zu (siehe Baugruppen-Übersicht).
- 4. Code-Nr.**
Vergleichen Sie die Code-Nummern vom Lieferschein mit der Code-Auflistung der entsprechenden Baugruppe. Code-Nr.: 626 Rückengurthöhe 30cm
- 5. Darstellung der gewählten Baugruppe mit entsprechender Code-Nr. aufschlagen**
Im Inhaltsverzeichnis ist hinter der Code-Nr. die Seite angegeben, auf der Sie die gesuchte Darstellung und Stückliste finden.
- 6. Artikel-Nr.**
An dem zu bestellenden Ersatzteil ist eine Positions-Nr. angezogen, mit der Sie aus der Stückliste die entsprechende Artikel-Nr. ablesen können. Pos.-Nr. 1.1.1 ist Bestandteil der Pos.-Nr. 1.1; Pos.-Nr. 1.1 ist wiederum Bestandteil der Pos.-Nr. 1
- 7. Stückzahl festlegen**
Anzahl der zu ersetzenden Bauteile festlegen.
Bemerkung:
Die in der Stückliste angegebenen Stückzahlen entsprechen der Anzahl der in der Baugruppe (linke und rechte Rollstuhlseite) verwendeten Bauteile.
- 8. Benennung festlegen**
Aus der Stückliste die entsprechende Benennung ablesen.
- 9. Farbe festlegen**
Entnehmen Sie die Farbcodierung dem Lieferschein.
- 10. Ersatzteil-Bestellung:**
Für eine korrekte Bestellung geben Sie alle Daten an.


Achten Sie bei Ihrer Bestellung auf die richtigen Bestellangaben; nur so ist gewährleistet, dass Ihnen das richtige Ersatzteil zugestellt wird.

Achtung!

Nachträgliche Veränderungen an dem Rollstuhl sowie Kundenvereinbarungen, die die instanzzusetzende Baugruppe betreffen, sind bei einer Ersatzteilbestellung anzugeben.

Wichtiger Hinweis!


Bei jeder Veränderung, die am Rollstuhl vorgenommen wird, sollten vom Fachhändler die entsprechende Code-Nr. sowie das Datum der Änderung der Betriebsanleitung des entsprechenden Rollstuhles beigelegt werden. So gibt es bei späteren Ersatzteilbestellungen keine falschen Bestellangaben. **Original- MEYRA-ORTOPEDIA -Ersatzteile!**

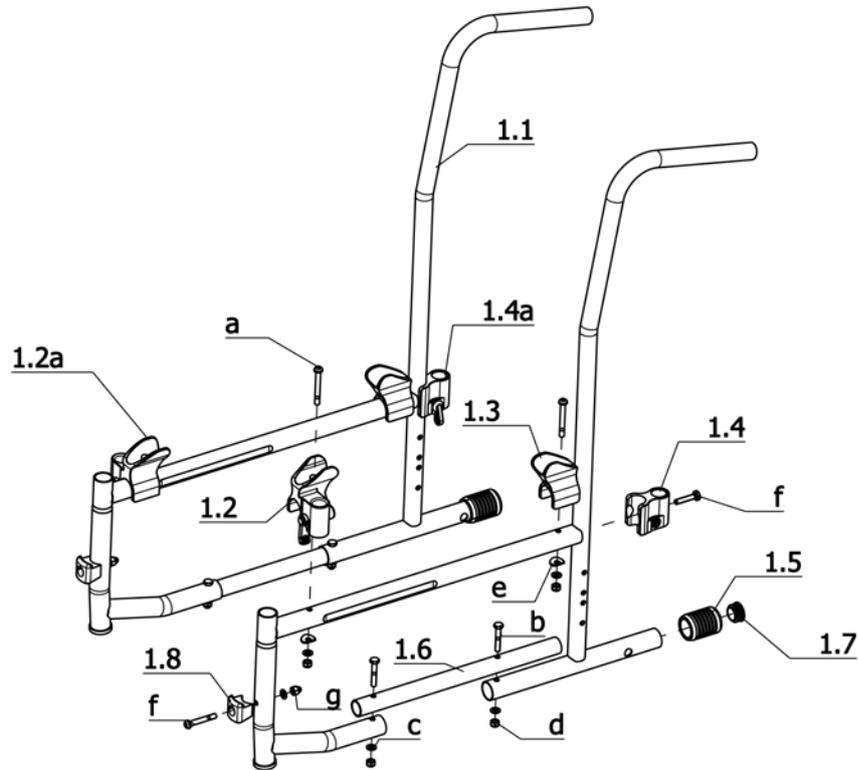

U-Bg.: Rahmen


Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
1.1	1 059 437	2	SEITENRAHMEN
1.2	1 039 441	1	RIEGELFÜHRUNG LINKS
1.2a	1 039 443	1	RIEGELFÜHRUNG RECHTS
1.3	205 213 106	2	HINTERE SITZLAGERUNG
1.4	1 058 834	1	LAGERBOCK LINKS MONT. (HINTEN)
1.4a	1 058 835	1	LAGERBOCK RECHTS MONT.(HINTEN)
1.5	1 058 832	2	AUFTRITTKAPPE GELOCHT L=45MM DI=24MM DA=34MM
1.6	1 061 786	2	ZWISCHENROHR FÜR SEITENRAHMEN
1.7	8 012 351	2	LAMELLENSTOPFEN,SCHWARZ SFL 25 F.ROHR 25/20-22
1.8	205 214 306	2	RASTBOLZENAUFNAHME
a	205 598 300	4	LINSENSCHRAUBE M 6 X 50 SO. MIT INNENSECHSKANT
b	207 308 000	4	SECHSKANTSCHRAUBE M 6 X 35 DIN 931 8.8
c	207 330 200	8	SCHEIBE B 6,4 DIN125 140HV A3T
d	207 320 100	8	SICHERUNGSMUTTER M 6 DIN 985
e	1 044 522	4	SCHEIBE
f	207 602 700	2	SCHNEIDSCHRAUBE M6X30
g	207 320 000	2	HUTMUTTER M 6 DIN 986
h	205 597 400	2	LINSENSCHRAUBE M 6 X 40 10.9 A3T INNENSECHSK.SONDERSCHRAUBE

Budget 2 / a
Baugruppe: Bremse

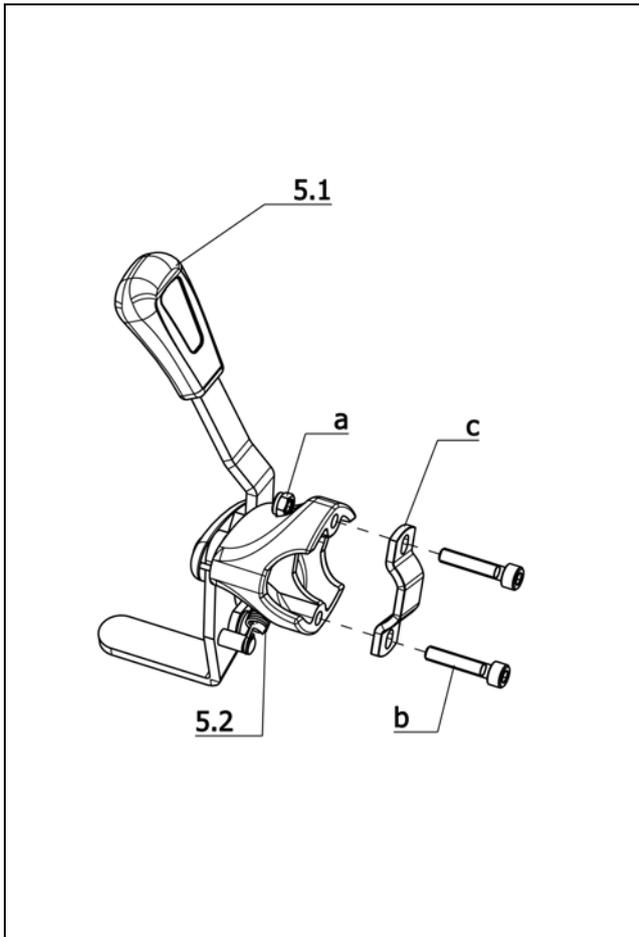


U-Bg.: Druckbremse

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
5	1 056 789	1	BREMSE RECHTS MONT.
5a	1 056 788	1	BREMSE LINKS MONT.
5.1	1 052 924	2	BREMSSGRIF
5.2	206 300 000	2	ZUGFEDER DIN2076 DM=7 ; D=1 ; LO=23,5
a	207 322 000	4	SICHERUNGSMUTTER M 5 DIN 985
b	207 120 800	4	ZYLINDERSCHRAUBE M 5 X 25 DIN912 10.9
c	1 068 130	2	ROHRSCHELLE FÜR DRUCKBREMSE ANGEDRÜCKT FÜR D=25MM ROHR

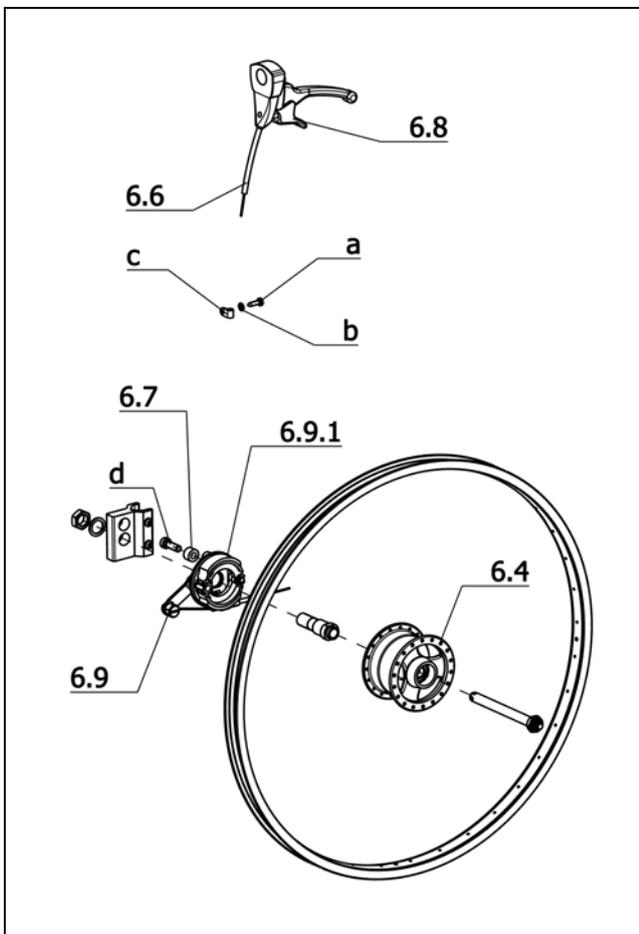


U-Bg.: Trommelbremse

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
6.4	0	1	siehe Seite Antriebsräder
6.6	206 662 100	2	BOWDENZUG VOLLST. L=878MM ; LH=751MM
6.7	1 062 218	2	GEGENHALTER (BUCHSE) D=15.8 DI=8.1 L=11 MM
6.8	8 401 828	2	BETÄTIGUNGSHEBEL MIT SPERRE
6.9	5 006 542	1	BREMSSCHILD LINKS MONT.
6.9a	5 006 541	1	BREMSSCHILD RECHTS MONT.
6.9.1	205 901 800	2	BREMSSCHALTE MIT SPANNFEDER (VERSION 1 - BELAG GRAU)
a	207 300 300	2	LINSENKOPF-BLECHSCHRAUBE B 4,8X19 ISO 7049 C-H-ST A3T
b	207 330 100	2	SCHEIBE B 5,3 DIN125 140HV A3T
c	205 017 300	2	BEFESTIGUNGSSCHELLE F.BOWDENZ.
d	207 122 400	2	ZYLINDERSCHRAUBE M 8 X 25 DIN6912 8.8 VC3 BESCHICHTET

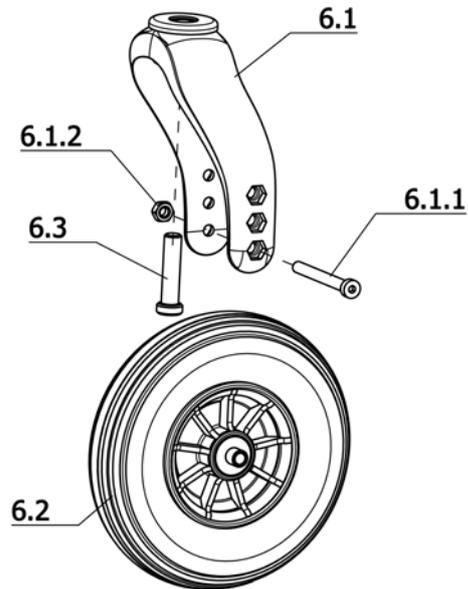
**U-Bg.: Lenkrad**

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
6.1	1 069 889	2	LENKGABEL MONT. MIT RADACHSE
6.1.1	207 598 100	2	ZYLINDERSCHRAUBE M 8 X 75 DIN7984 8.8 A3T
6.1.2	207 320 400	2	SECHSKANTMUTTER M 8 DIN934
-	206 502 600	2	RILLENKUGELLAGER DIN 625 6002-2 Z
-	1 069 612	2	ABDECKKAPPE (LENKGABELLAGER)
6.2	206 271 800	2	LENKRAD 7 x 1 3/4" PU CODE 161 (175 X 40) NL 45 MM
6.3	206 251 040	2	ZYLINDERSCHRAUBE M 12 X 50 VC3 BESCHICHTET SONDERSCHRAUBE

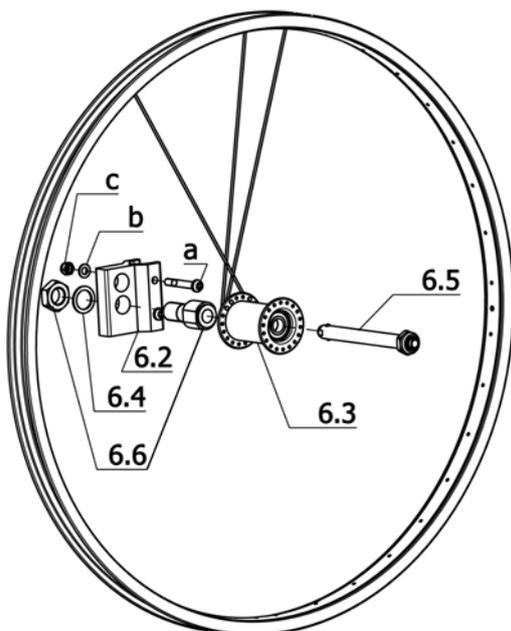**U-Bg.: Antriebsrad**


Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
6.2	1 070 123	2	RADADAPTER
6.4	205 592 100	2	SICHERUNGSSCHEIBE M 16
a	205 597 400	4	LINSENSCHRAUBE M 6 X 40 10.9 A3T INNENSECHSK.SONDERSCHRAUBE
b	207 330 200	4	SCHEIBE B 6,4 DIN125 140HV A3T
c	207 320 100	4	SICHERUNGSMUTTER M 6 DIN 985
Antriebsrad für Druckbremse			
6.3	1 043 663	2	ANTRIEBSRAD KPL.24X1 3/8" CODE 61-641-495- 692-902
6.5	206 227 710	2	STECKACHSE MIT SICHERUNGSM.
6.6	206 227 720	2	ADAPTER MIT SECHSKANTMUTTER
Antriebsrad für Trommelbremse			
6.3	1 043 509	2	ANTRIEBSRAD 24X1 3/8" TR.BR.PU CODE:61-902- 692-495
6.5	206 226 530	2	STECKACHSE MIT SICHERUNGSM.
6.6	206 227 500	2	ADAPTER MIT SECHSKANTMUTTER
Antriebsräder - Bereifung			
-	206 118 902	2	DECKE 24 X 1 3/8" PU-GRAU 0399
Greifreifen			
-	1 042 510	2	GREIFREIFEN 24" STAHL 0844
-	207 536 400	8	KOMBI-SCHRAUBE DIN 933M5x10-Z1-8.8A3T
-	207 805 100	8	VIERKANTMUTTER M 5 DIN557 SW10

Budget 2 / a
Baugruppe: Rücken

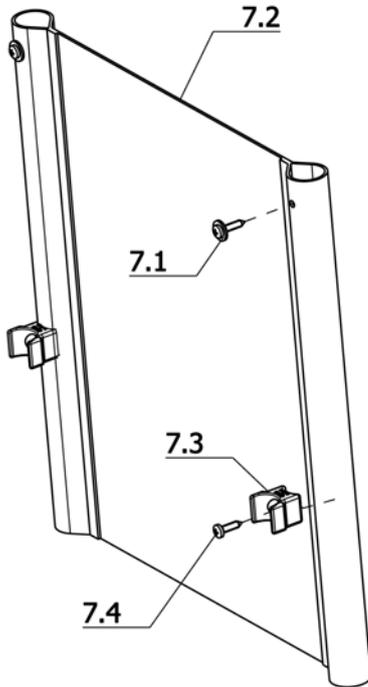

U-Bg.: Rückengurte


Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
7.1	207 300 300	2	LINSENKOPF-BLECHSCHRAUBE B 4,8X19 ISO 7049 C-H-ST A3T
7.3	205 016 906	2	SEITENTEILANLAGE SCHWARZ POLYAMID 6 RAL 9005
7.4	207 317 500	2	BLECHSCHRAUBE B 4,8 X 22 DIN 7981 SCHWARZ
Code 38; Sitzbreite 38cm			
7	1 070 578	1	RÜCKEN CODE 38-442-622
7.2	1 057 096	1	RÜCKENGURT CODE 38-442-621/622 4010
Code 40; Sitzbreite 40cm			
7	1 070 579	1	RÜCKEN CODE 40-442-622
7.2	1 057 097	1	RÜCKENGURT CODE 40-442-621/622 4011
Code 43; Sitzbreite 43cm			
7	1 070 580	1	RÜCKEN CODE 43-442-622
7.2	1 057 098	1	RÜCKENGURT CODE 43-442-621 4012
Code 46; Sitzbreite 46cm			
7	1 070 581	1	RÜCKEN CODE 46-442-622
7.2	1 057 099	1	RÜCKENGURT CODE 46-442-621 4012
Code 48; Sitzbreite 48cm			
7	1 070 582	1	RÜCKEN CODE 48-442-622
7.2	1 057 100	1	RÜCKENGURT CODE 48-442-621/622 4014
Code 345; Sitzbreite 51cm			
7	1 070 565	1	RÜCKEN CODE 345-442-622
7.2	1 070 564	1	RÜCKENGURT CODE 345-442-621

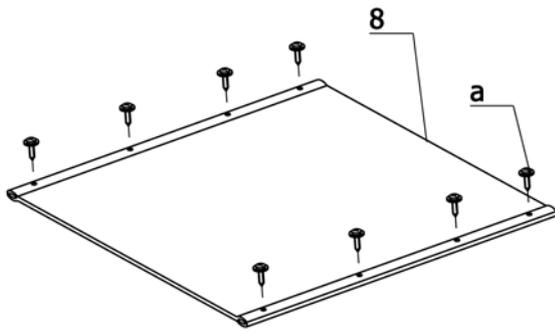

U-Bg.: Sitzgurte


Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
a	207 317 500	8	BLECHSCHRAUBE B 4,8 X 22 DIN 7981 SCHWARZ Code 38; Sitzbreite 38cm
8	1 068 157	1	SITZ CODE 35-38-788 4000 Code 40; Sitzbreite 40cm
8	1 068 158	1	SITZ CODE 35-40-788 4001 Code 43; Sitzbreite 43cm
8	1 068 159	1	SITZ CODE 35-43-788 4002 Code 46; Sitzbreite 46cm
8	1 068 360	1	SITZ CODE 35-46-788 4003 Code 48; Sitzbreite 48cm
8	1 068 361	1	SITZ CODE 35-48-788 4004 Code 345; Sitzbreite 51cm
8	1 070 571	1	SITZ CODE 345-788

Budget 2 / a
Baugruppe: Seitenteil

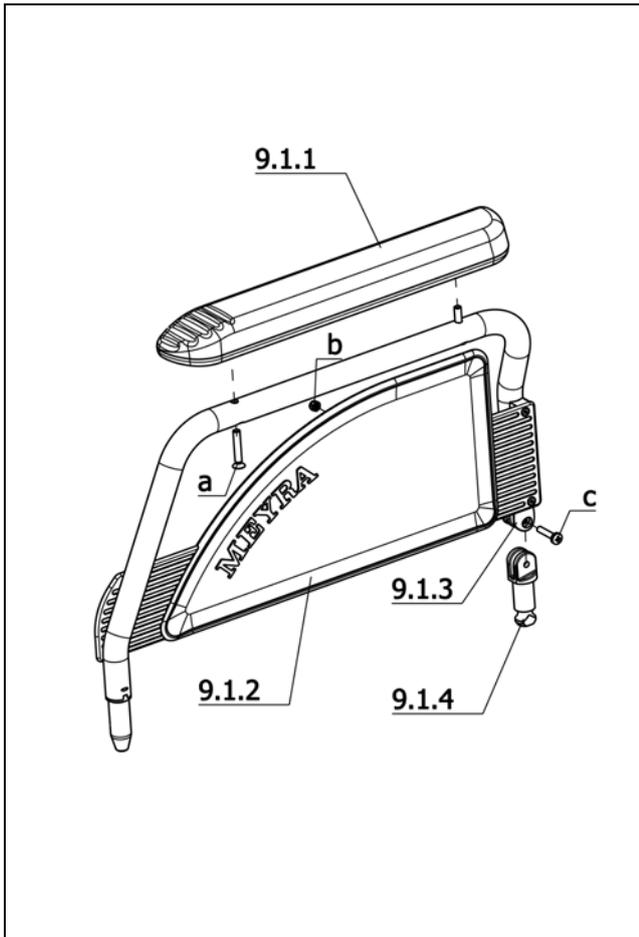


U-Bg.: Code 70; Seitenteil lang, abschwenkbar, abnehmbar

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
9	1 048 988	1	SEITENTEILE CODE 70 (PAAR)
9.1	1 048 987	1	SEITENTEIL LINKS MONT. CODE 70
9.1a	1 048 984	1	SEITENTEIL RECHTS MONT. CODE 70
9.1.1	1 036 473	1	ARMLEHNE LINKS -POLSTER (L=360MM;B=56MM;H=26MM)
9.1.1a	1 036 479	1	ARMLEHNE RECHTS - POLSTER (L=360MM;B=56MM;H=26MM)
9.1.2	205 215 806	1	SEITENTEIL LINKS
9.1.2a	205 215 906	1	SEITENTEIL RECHTS
9.1.3	205 221 806	2	GABELLAGERUNG OBEN (FÜR 17.8MM INNEND.)
9.1.4	205 221 906	2	GABELAUFNAHME UNTEN
a	207 119 700	4	LINSENKOPF-SENKSCHRAUBE M 6 X 35 DIN966 4.8 A3T KREUZ.
b	207 322 000	2	SICHERUNGSMUTTER M 5 DIN 985
c	207 341 300	2	LINSENSCHRAUBE M 5 X 25 DIN7985 H 4.8 A3T
-	205 525 700	4	POP-BLINDNIET D=4 X 12,1 ALU
-	205 515 400	2	POP-BLINDNIET D=4 X 8,5 AL/VA
-	205 571 600	4	POP-BLINDNIET D=4 X 22,5 AL/ST

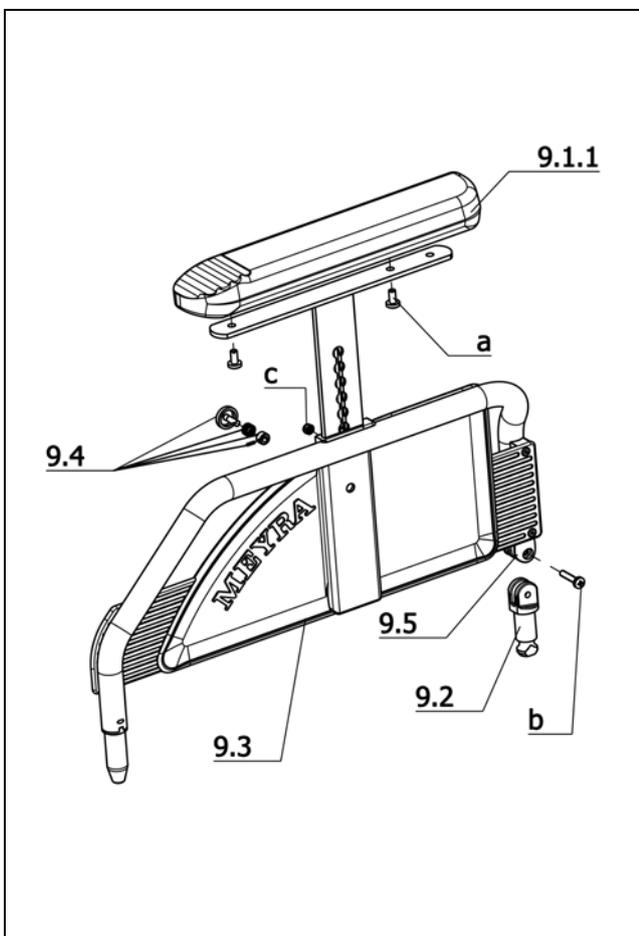


U-Bg.: Code 107; Seitenteil abschwenkbar, höhenverstellbar, abnehmbar

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
-	1 044 119	1	SEITENTEILE CODE 107 KPL.1PAAR
9	1 044 113	1	SEITENTEIL LINKS MONT.
9a	1 044 118	1	SEITENTEIL RECHTS MONT.
9.1	1 044 116	1	ARMLEHNE LINKS MONT.
9.1a	1 044 117	1	ARMLEHNE RECHTS MONT.
9.1.1	1 039 106	1	ARMLEHNE LINKS - POLSTER (L=307MM;B=60MM;H=26MM)
9.1.1a	1 039 107	1	ARMLEHNE RECHTS - POLSTER (L=307MM;B=60MM;H=26MM)
9.2	205 221 906	2	GABELAUFNAHME UNTEN
9.3	205 222 706	1	SEITENTEIL LINKS ABS SCHWARZ
9.3a	205 222 806	1	SEITENTEIL RECHTS ABS SCHWARZ
9.4	5 005 740	2	AUSLÖSEHEBEL MONT.
9.5	205 221 806	2	GABELLAGERUNG OBEN (FÜR 17.8MM INNEND.)
a	207 340 600	4	LINSENSCHRAUBE M 6 X 12 DIN7985 H 4.8 A3T
b	207 341 300	2	LINSENSCHRAUBE M 5 X 25 DIN7985 H 4.8 A3T
c	207 322 000	2	SICHERUNGSMUTTER M 5 DIN 985
-	205 571 600	4	POP-BLINDNIET D=4 X 22,5 AL/ST
-	205 515 400	2	POP-BLINDNIET D=4 X 8,5 AL/VA
-	205 528 600	2	POP-BLINDNIET D=4 X 9,9 AL/ST
-	205 525 700	4	POP-BLINDNIET D=4 X 12,1 ALU

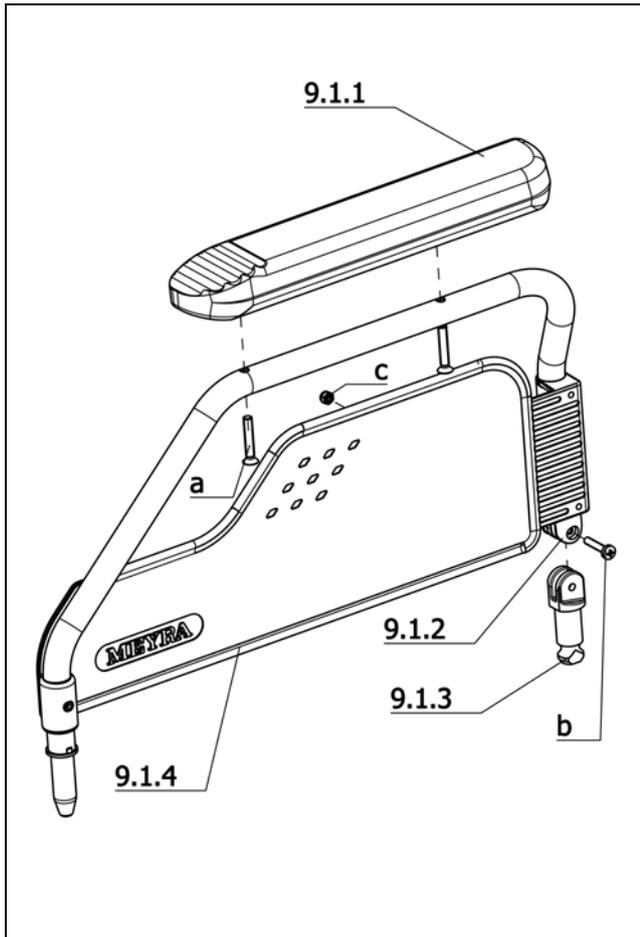
**U-Bg.: Code 577; Abklappbares Seitenteil mit Kunststoffeinsatz
Stahl**


Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
9	1 054 280	1	SEITENTEILE CODE 577 (PAAR)
9.1	1 052 958	1	SEITENTEIL LINKS MONT.CODE577
9.1a	1 052 959	1	SEITENTEIL RECHTS MONT.CODE577
9.1.1	1 039 106	1	ARMLEHNE LINKS - POLSTER (L=307MM;B=60MM;H=26MM)
9.1.1a	1 039 107	1	ARMLEHNE RECHTS - POLSTER (L=307MM;B=60MM;H=26MM)
9.1.2	1 052 948	2	GABELLAGERUNG OBEN (FÜR 15.8MM INNEND.)
9.1.3	205 221 906	2	GABELAUFNAHME UNTEN
9.1.4	1 052 945	1	SEITENTEIL LINKS (NUR KUNSTSTOFFTEIL)
9.1.4a	1 052 950	1	SEITENTEIL RECHTS (NUR KUNSTSTOFFTEIL)
a	207 119 700	4	LINSENKOPF-SENKSCHRAUBE M 6 X 35 DIN966 4.8 A3T KREUZ.
b	207 341 300	2	LINSENSCHRAUBE M 5 X 25 DIN7985 H 4.8 A3T
c	207 322 000	2	SICHERUNGSMUTTER M 5 DIN 985
-	205 571 000	4	POP-BLINDNIET D=4 X 14 AL/ST
-	205 570 400	4	POP-BLINDNIET D=4 X 10,3 AL/VA
-	205 571 600	4	POP-BLINDNIET D=4 X 22,5 AL/ST

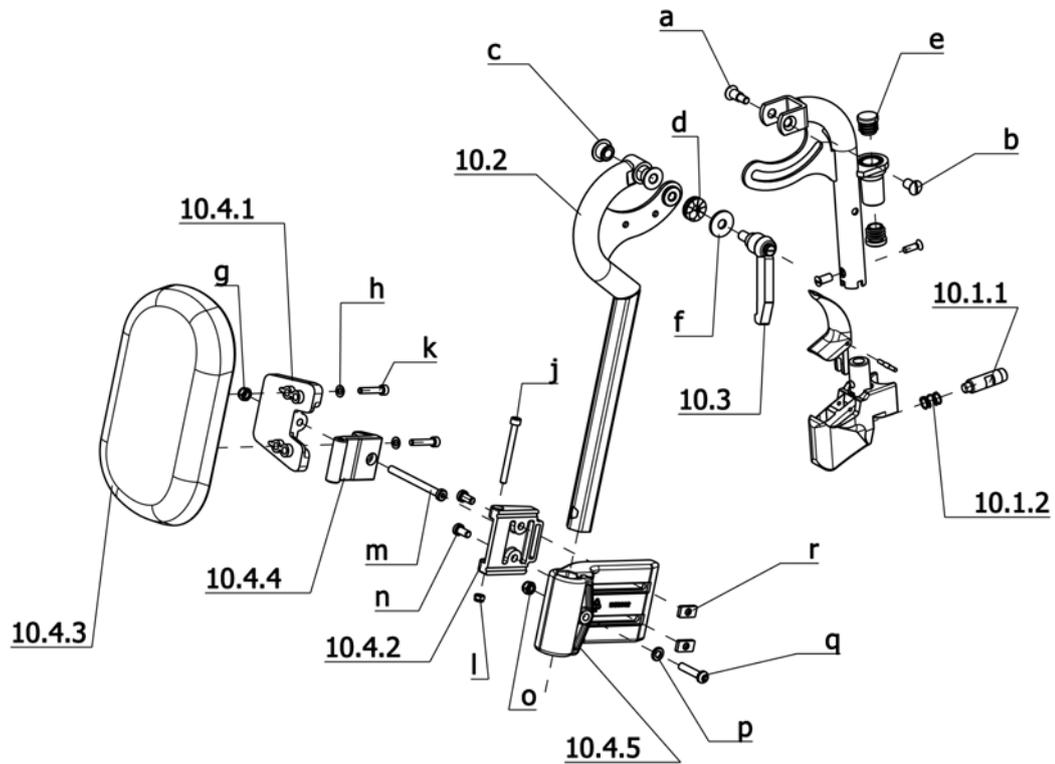Budget 2 / a
Baugruppe: Beinstützen

U-Bg.: Code 92; abnehmbare höhenverstellbare Beinstütze, abschwenkbar

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
-	1 057 532	1	BEINSTÜTZENOBERTEILE CODE 92 1 PAAR
10	1 062 212	1	BEINSTÜTZOBERTEIL LINKS CODE 92
10a	1 062 213	1	BEINSTÜTZOBERTEIL RECHTS CODE 92
10.1	1 053 687	2	BEINSTÜTZROHR KPL.
10.1.1	205 222 206	2	VERRIEGELUNGSBOLZEN
10.1.2	206 323 000	2	DRUCKFEDER D-151 A DM=11 ; D=1 ; LO=21,4
10.2	1 058 915	1	WADENPLATTENROHR LINKS VOLLST.
10.2a	1 059 443	1	WADENPLATTENROHR RECHTS VOLLST .
10.3	206 656 600	2	KIPP-KLEMMHEBEL M 8 X 15
10.4	5 006 345	1	WADENPOLSTER MONT.
10.4.1	1 059 657	2	SCHWENKPLATTE
10.4.2	1 061 036	2	SCHANIERTRÄGER LANG
10.4.3	1 059 656	2	WADENPLATTE SCHMAL
10.4.4	1 059 655	2	SCHARNIER
10.4.5	1 058 902	2	TRÄGERSCHELLE


U-Bg.: Code 92; abnehmbare höhenverstellbare Beinstütze, abschwenkbar

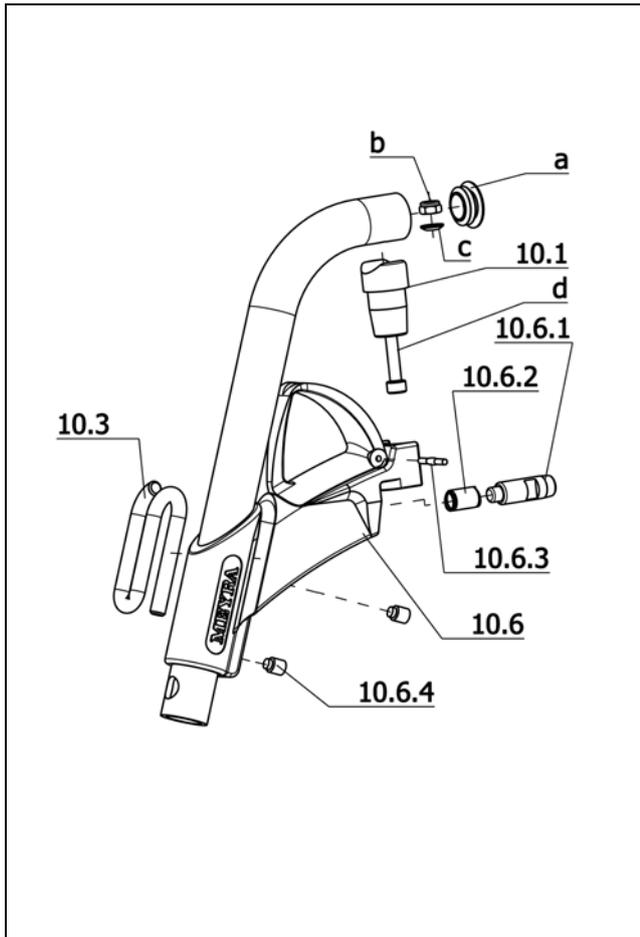Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
a	205 596 200	2	ANSATZSCHRAUBE
b	205 596 100	2	HÜLSENMUTTER M6 MIT SCHLITZ ->Achtung! Schrauben mit Nr.243 Loctite 205 638 800 sichern.
c	1 047 682	4	BÜCHSE
d	205 595 000	2	SICHERUNGSSCHEIBE ->Die grob verzahnte Seite der Scheibe zur Gewindebuchse zeigend montieren.
e	205 027 100	2	KUNSTSTOFFGLEITER GL 18
f	207 335 000	2	SCHEIBE B 8,4 DIN9021 140HV A3T
g	207 320 100	2	SICHERUNGSMUTTER M 6 DIN 985
h	207 330 100	4	SCHEIBE B 5,3 DIN125 140HV A3T
j	207 304 100	2	ZYLINDERSCHRAUBE M 5 X 55 ISO 4762 8.8 A3T
k	207 120 800	4	ZYLINDERSCHRAUBE M 5 X 25 DIN912 10.9
l	207 322 000	2	SICHERUNGSMUTTER M 5 DIN 985
m	207 351 000	2	ZYLINDERSCHRAUBE M 6 X 70 DIN7984 8.8 A3T
n	207 350 200	4	ZYLINDERSCHRAUBE M 6 X 12 DIN6912 8.8 A3T
o	207 417 500	2	SICHERUNGSMUTTER M 6 DIN 985 10 A3C
p	207 330 200	2	SCHEIBE B 6,4 DIN125 140HV A3T
q	207 380 200	2	LINSENSCHRAUBE M 6 X 30 ISO 7380 10.9 A3T
r	1 061 035	4	RECHTECKMUTTER M 6
-	207 300 600	2	SECHSKANTSCHRAUBE M 6 X 30 DIN 931 8.8
-	207 330 200	2	SCHEIBE B 6,4 DIN125 140HV A3T
-	207 417 500	2	SICHERUNGSMUTTER M 6 DIN 985 10 A3C




U-Bg.: Code 93; abnehmbare Beinstützen abschwenkbar

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
10	1 044 267	1	BEINSTÜTZOBERTEIL LINKS MONT.
10a	1 044 266	1	BEINSTÜTZOBERTEIL RECHTS MONT.
10.1	1 042 609	2	LAGERZAPFEN
10.3	1 039 515	2	BEINGURTSTIFT
10.6	1 039 505	2	BEINSTÜTZHALTER KPL.
10.6.1	205 214 406	2	VERRIEGELUNGSBOLZEN
10.6.2	206 323 000	2	DRUCKFEDER D-151 A DM=11 ; D=1 ; LO=21,4
10.6.3	207 907 500	2	KNEBELKERBSTIFT 3 X 24 DIN1475
10.6.4	207 252 600	4	GEWINDESTIFT M8 X 10 DIN915
a	1 051 059	2	KUNSTSTOFFGLEITER GL 25
b	207 320 100	2	SICHERUNGSMUTTER M 6 DIN 985
c	207 881 000	2	KUGELSCHIBE C6.4 DIN 6319
d	207 302 100	2	ZYLINDERSCHRAUBE M 6 X 35 DIN912 8.8 A3T
-	207 626 600	2	LINSENSCHRAUBE M 6 X 30 DIN7985 H 4.8 A3T
-	207 330 200	2	SCHEIBE B 6,4 DIN125 140HV A3T
-	207 320 100	2	SICHERUNGSMUTTER M 6 DIN 985
Sitzbreite 38 – 40cm			
-	1 054 134	1	BEINSTÜTZE CODE 38-93 KPL.
-	1 003 026	1	BEINGURT SB 38/40
Sitzbreite 43 – 51cm			
-	1 044 525	1	BEINSTÜTZENOBERTHEILE - 1 PAAR CODE 40/43/45/46/48-93
-	1 030 237	1	BEINGURT SB 40-58

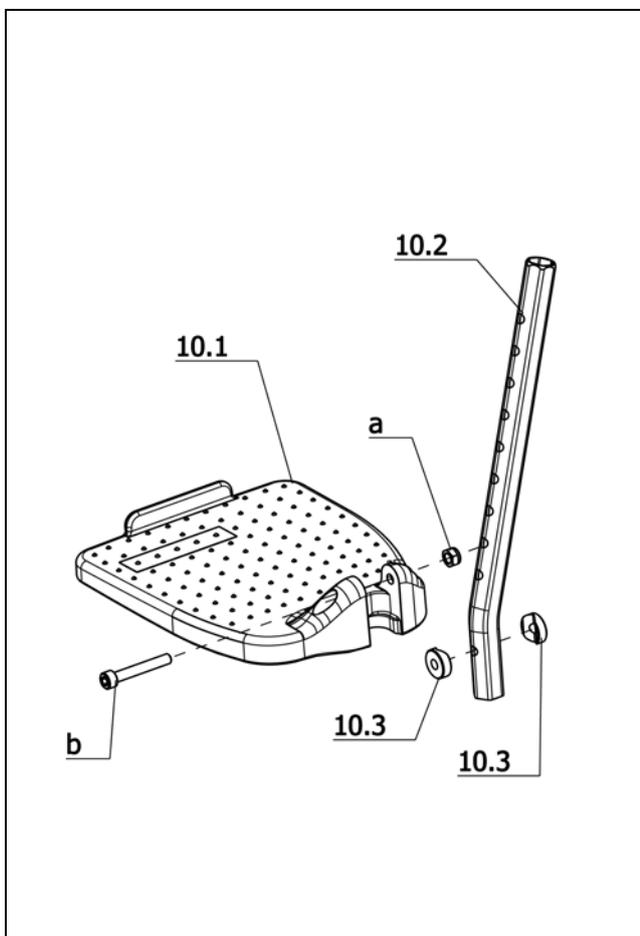

U-Bg.: Code 805; Fußplatten Kunststoff geteilt


Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
-	1 059 649	1	EINSTECKROHRE CODE 805-128 1P.
10	1 059 644	1	FUSSBRETT LINKS MONT. CODE 128-805
10a	1 059 646	1	FUSSBRETT RECHTS MONT. CODE 128-805
10.1	1 059 642	1	FUSSBRETT LINKS
10.1a	1 059 645	1	FUSSBRETT RECHTS
10.2	1 059 643	1	EINSTECKROHR (FÜR CODE 128-805/806 GELOCHT)
10.3	1 058 905	4	GELENKSCHIBE
a	207 320 100	2	SICHERUNGSMUTTER M 6 DIN 985
b	207 302 200	2	ZYLINDERSCHRAUBE M 6 X 40 DIN912 8.8 A3T

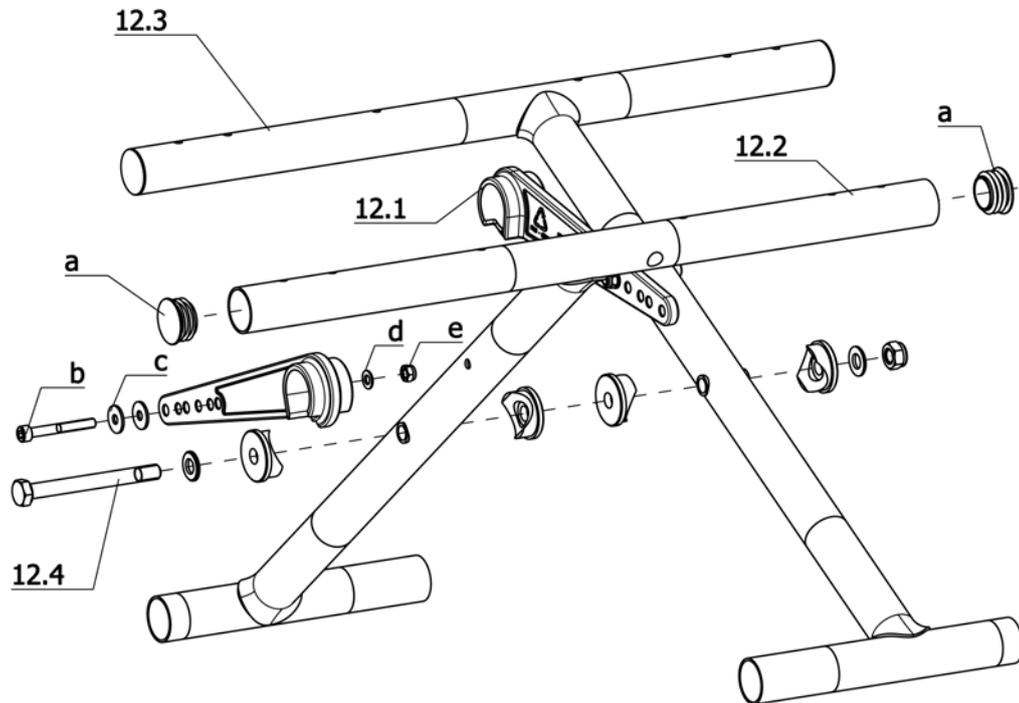Budget 2 / a
Baugruppe: Scheren

U-Bg.: Scheren

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
12.1	1 069 557	2	SCHERENSTREBE
12.4	5 005 235	1	SCHERENVERSCHRAUBUNG KPL.
a	8 012 351	4	LAMELLENSTOPFEN, SCHWARZ SFL 25 F.ROHR 25/20-22
b	207 301 600	2	ZYLINDERSCHRAUBE M 5 X 40 DIN912 10.9 ZN/NI
c	207 330 000	4	SCHEIBE B 5,3 DIN9021 140HV A3T
d	207 330 100	2	SCHEIBE B 5,3 DIN125 140HV A3T
e	207 322 000	2	SICHERUNGSMUTTER M 5 DIN 985
Code 38; Sitzbreite 38cm			
12	1 048 993	1	SCHERE MONT. SB 38 CM
12.2	1 048 991	1	VORDERE SCHERENHÄLFTE SB 38 CM
12.3	1 048 992	1	HINTERE SCHERENHÄLFTE SB 38 CM
Code 40; Sitzbreite 40cm			
12	1 044 262	1	SCHERE MONT. SB 40 CM
12.2	1 044 254	1	VORDERE SCHERENHÄLFTE SB 40 CM
12.3	1 044 258	1	HINTERE SCHERENHÄLFTE SB 40 CM

U-Bg.: Scheren

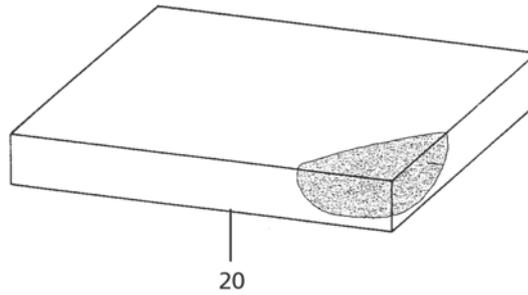Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
Code 43; Sitzbreite 43cm			
12	1 044 263	1	SCHERE MONT. SB 43 CM
12.2	1 044 255	1	VORDERE SCHERENHÄLFTE SB 43 CM
12.3	1 044 259	1	HINTERE SCHERENHÄLFTE SB 43 CM
Code 46; Sitzbreite 46cm			
12	1 069 558	1	SCHERE MONT. SB 46 CM
12.2	1 069 555	1	VORDERE SCHERENHÄLFTE SB 46 CM
12.3	1 069 556	1	HINTERE SCHERENHÄLFTE SB 46 CM
Code 48; Sitzbreite 48cm			
12	1 044 265	1	SCHERE MONT. SB 48 CM
12.2	1 044 257	1	VORDERE SCHERENHÄLFTE SB 48 CM
12.3	1 044 261	1	HINTERE SCHERENHÄLFTE SB 48 CM
Code 345; Sitzbreite 51cm			
12	1 070 561	1	SCHERE MONT. SB 51 CM
12.2	1 070 159	1	VORDERE SCHERENHÄLFTE SB 51 CM
12.3	1 070 560	1	HINTERE SCHERENHÄLFTE SB 51 CM



ST=Sitztiefe
SB=Sitzbreite

		SB 38	SB 40	SB 43	SB 46	SB 48	SB 51
ST 43	3 cm	1006685	1006685	1061681	1015928	1046382	1046382

Budget 2 / a
Baugruppe: Zubehör**U-Bg.: Zubehör**

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
			Code 691; Stützrollen
-	1 045 837	2	STÜTZROLLE MONT.
			Code 819; Passive Beleuchtung
-	1 047 486	1	PASSIVE BELEUCHTUNG
			Code 833; Haltegurt
-	1 041 414	1	HALTEGURT KPL. CODE 833
			Code 970; Stockhalter
-	1 063 168	1	STOCKHALTER KPL. -NACHRÜSTSATZ (CLIPS SCHRAUB-SET) 0684

Budget 2 / a
Notizen



Ihr Fachhändler

MEYRA[®]
ORTOPEDIA
Wir bewegen Menschen

MEYRA-ORTOPEDIA
Vertriebsgesellschaft mbH
Meyra-Ring 2 • D-32689 Kalletal-Kalldorf

Postfach 1703 • D-32591 Vlotho
Fon +49(0)5733 922-333
Fax +49(0)5733 922-9333
info@meyra.de • www.meyra.de
info@ortopedia.de • www.ortopedia.de

VIS III / Bestell-Nr. 205338600 Stand: 2010-09 Technische Änderungen vorbehalten.